

iVolve

Máscara Buconasal BMC-FM

Ajuste ligero, personalizado y cómodo

Máscara Buconasal iVolve cuenta con una innovadora y exclusiva estructura para la frente ajustable de mecanismo 3-2 que ofrece un ajuste y fijación más personalizado. Es liviana y cómoda. Mecanismo superior con broches adaptables, fáciles de acoplar y desmontar. Ajustable a distintos tamaños faciales, mantiene la posición de dicho mecanismo para mayor comodidad.


CÓDIGOS DE PRODUCTO

Artículo	Nº de pieza
Máscara Buconasal iVolve (tamaño pequeño) con mecanismo superior	10030010
Máscara Buconasal iVolve (tamaño mediano) con mecanismo superior	10030015
Máscara Buconasal iVolve (tamaño grande) con mecanismo superior	10030006

Piezas y accesorios de repuesto	Nº de pieza
Mecanismo superior con broches	21030001
Broches (2 unidades)	350133
Almohadilla para la frente	60360061
Estructura para la frente	350144
Estructura principal	350143
Estructura para la almohadilla pequeña	360052
Estructura para la almohadilla mediana	360053
Estructura para la almohadilla grande	360054
Almohadilla pequeña	360055
Almohadilla mediana	360057
Almohadilla grande	360050
Almohadilla fina, pequeña	360051
Almohadilla fina, mediana	360056
Almohadilla fina, grande	360049
Codo y conexión giratoria	61030019
Vice-conexión giratoria	60350132



Sleep Well, Live Better

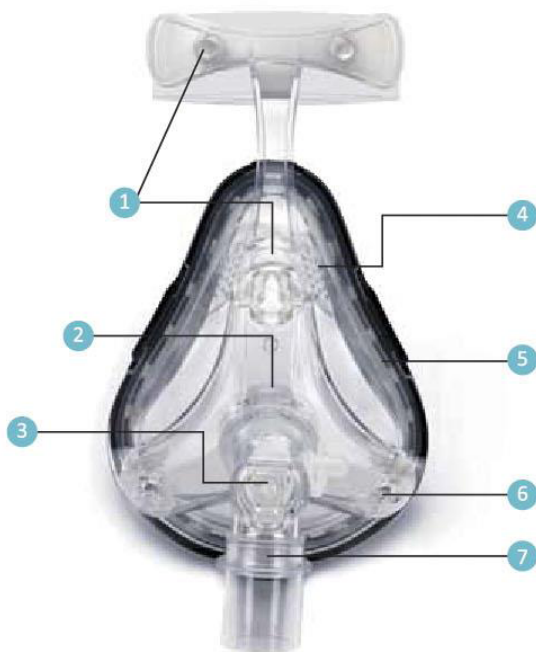

1. Estructura exclusiva para la frente que cuenta con mecanismo 3-2 ajustables; ofrece un ajuste, fijación y comodidad más personalizados.

2. Giro del codo de 360° que permite posicionar el tubo para máxima comodidad.

3. Válvula antiasfixia que garantiza la seguridad si el flujo de aire se detiene u obstruye.

4. Orificio de ventilación bilateral que dispersa el aire suave y silenciosamente, lejos del compañero de cama. Reduce eficazmente el espacio muerto.

5. Acolchado doble, material de silicona suave. Forma ergonómica de la almohadilla que ofrece más comodidad y fijación.

6. Broches adaptativos del mecanismo superior que son fáciles de acoplar y desmontar. Se adaptan a la cara de diferentes personas y mantienen la posición del mecanismo superior más confortable.

7. Doble conexión giratoria opcional que ofrece una forma práctica de conectar y desconectar el tubo.

Estructura principal



Estructura para la almohadilla



Almohadilla



Almohadilla Fina



Estructura para la frente



Almohadilla para la frente



Codo



Vice-conexión giratoria

Broches



Estructura Máscara Buconasal iVolve